



# CHARMANT ClariShield

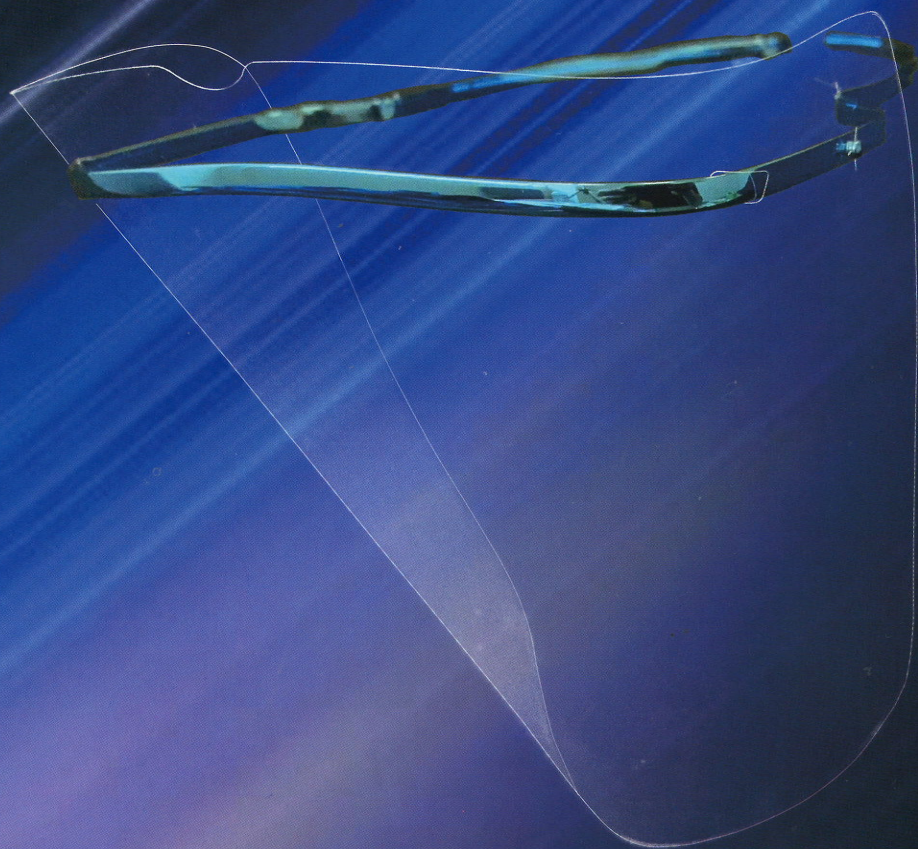

## 専用フィルムに待望のロングバリエーション追加！

超低反射・高透過・防曇の高機能フィルムを、縦方向にストレッチしました。  
フレームはMサイズ・Sサイズとも、そのまま共通でお使いいただけます。

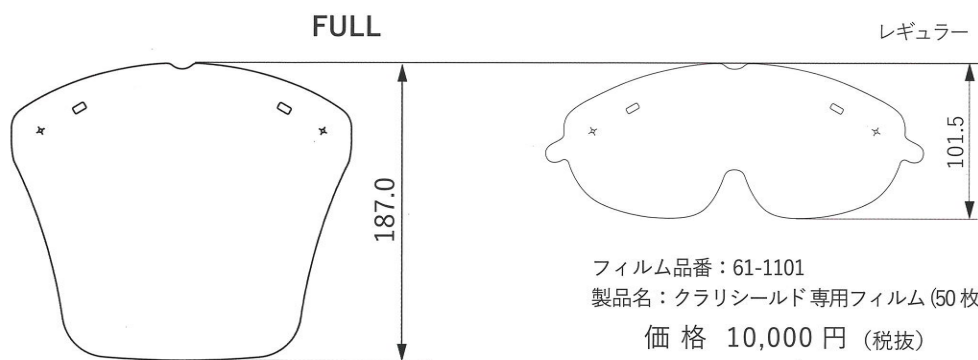

フィルム品番：61-1101  
製品名：クラリシールド専用フィルム (50 枚入)  
価格 10,000 円 (税抜)  
(税込 11,000 円)



フィルム品番：61-1105  
製品名：クラリシールド専用フィルム FULL (10 枚入)

価格 5,900 円 (税抜)  
(税込 6,490 円)

### フィルムの仕様



素 材：ポリエチレンテレフタレート (PET : Polyethylene terephthalate) / アクリル樹脂  
厚 み：100 $\mu$ m  
原産国：日 本

## 《製品の目的》

本製品は、微小な粉塵や水滴程度の液体が顔にかかることを簡易的に防ぐことを目的としたクラリシールド用の専用フィルムです。クラリシールドのフレームと組み合わせて使用して下さい。

## 《製品の特性》


本製品は透明フィルムの表層に、超低反射特性と防曇特性とを付与させた超高透過フィルムです。光学特性は、全光線透過率は99%、反射率は0.7%の性能を有します。防曇特性は呼気を想定した環境実験にて、一般的なフィルムに比べて一定の防曇性能を有していますが、呼気の強さや環境によっては効果に差が出る場合があります。

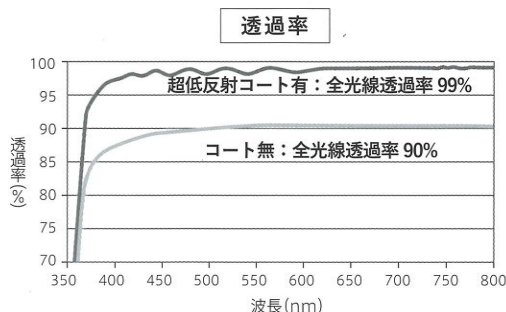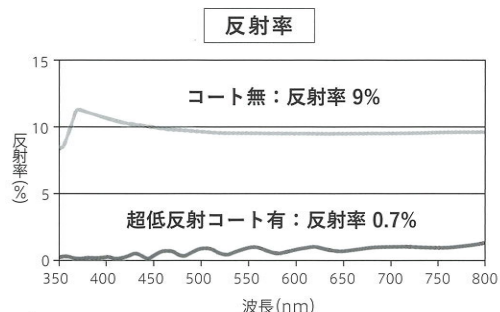

## 《製品環境安全情報》

- 【有害性情報】 本製品は通常の取り扱い方法（本来の使用状態）に於いて、健康に害を及ぼすことはありません。
- 【発火温度】 300℃以上（推定値）
- 【燃焼時に発生するガス】 CO等の有害ガスを発生する恐れがあります。
- 【保管上の注意】 直射日光を避け、推奨環境（気温5℃～35℃、75%RH以下）の場所に保管し、製品や包装に水、溶剤、ガス等をかけないで下さい。

## 《シールドの取り付け方》

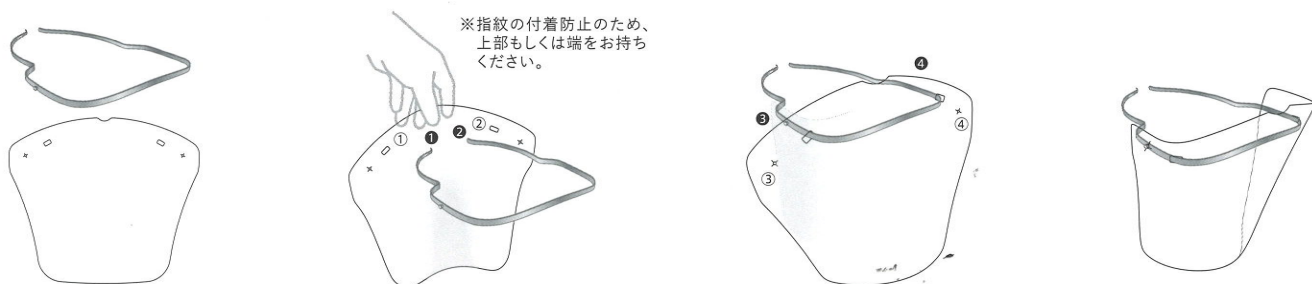

(1) フレーム及びフィルムは図示のようになります。

※フィルムに裏表はありません。

(2) フィルムをフレームに固定する場合はフィルムの穴①にフレームの先端部①を、フィルムの穴②にフレームの先端部②を通してください。

(3) フィルムをフレームに通した後にフィルム穴③をフレーム③に、フィルム穴④をフレーム④に入れて込んで固定します。

(4) フィルムがフレームにきちんと固定されているかを確認し、ご使用ください。



# 注意

# 誤った取り扱いをすると、ケガや破損の恐れがあります。

## 《使用上の注意》

- ① 本製品は**滅菌されておりません**。有機溶剤等、不適合な薬品を使用した滅菌、清掃はフィルムの劣化、破損の原因となりますので行わないで下さい。
- ② 本製品は、単回使用の使い捨てフィルムです。毎回新しいものにお取り換え下さい。
- ③ フィルムが汚れた場合は、防曇効果や視界の低下があるため必ず新しいものに交換して使用して下さい。
- ④ 化学物質の飛沫あるいはその蒸気露出からの保護には使用しないで下さい。
- ⑤ 本製品は防曇効果を有しますが、絶対に曇らないフィルムではありません。曇った場合にはすぐに使用を中止し、曇りが取れてから使用して下さい。
- ⑥ 本製品は非常に薄いため、使い方を誤ると手・顔・皮膚などに傷を付ける可能性があります。また、透明度が非常に高いため、目がフィルムを認識し損なうことがあります。取り扱いには十分注意して使用して下さい。
- ⑦ 光学特性は、製品の個体差や長期保管等の影響により、差が生じる場合があります。

製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# CHARMANT

● お問い合わせ先

株式会社 シヤルマン | メディカル事業部 カスタマーサービス

〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1

TEL.0120-180807 FAX.0120-030887

www.charmant-medical.com